Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF

Fyzikální praktikum ...



Úloha č					
Název úlohy:					
Jméno:		Obor:	FOF	FAF	FMUZV
Datum měření:	Datum odevzdání:				

Připomínky opravujícího:

	Možný počet bodů	Udělený počet bodů
Práce při měření	0 - 5	
Teoretická část	0 - 1	
Výsledky měření	0 - 8	
Diskuse výsledků	0 - 4	
Závěr	0 - 1	
Seznam použité literatury	0 - 1	
Celkem	max. 20	

Pracovní úkoly

- 1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.
- 2. Sestrojte graf této závislosti.

Teoretická část

Budeme měřit povrchové napětí roztoku lihu při koncentracích od 0 do $100\,\%$ odtrhávací metodou. Tato metoda spočívá v měření síly potřebné k odtržení tenkého drátku od hladiny měřené kapaliny. Pokud je drátek dostatečně tenký a má délku l, drží ho kapalina na hladině silou [1]

$$P_0 = 2 \cdot \sigma \cdot l \,, \tag{1}$$

kde σ je povrchové napětí.

Sílu P_0 budeme měřit torzními vahami. Na jedno rameno zavěsíme rámeček, ve kterém je upevněn drátek (viz obr. 1), a pod něj položíme kádinku s měřeným roztokem. Na druhé rameno pověsíme přívažky tak, aby odtržení drátku od hladiny proběhlo v rozsahu ciferníku torzních vah.

Protože na drátek nepůsobí pouze síla způsobená povrchovým napětím, změříme nejdříve sílu P_1 , při které jsou váhy vyvážené a drátek je těsně pod hladinou kapaliny. Poté budeme sílu zvětšovat a zároveň snižovat kádinku s roztokem, aby váhy zůstali vyvážené. Při určité síle P_2 se drátek odtrhne. Sílu P_0 určíme jako rozdíl sil P_2 a P_1 .

Lenard [2] udává korekci na drátek o poloměru r

$$\sigma = \frac{P_0}{2l} - r \left(\sqrt{\frac{P_0 \varrho g}{l}} - \frac{P_0}{l^2} \right) , \qquad (2)$$

kde ϱ je hustota kapaliny a g je tíhové zrychlení.

Výsledky měření

Teplota v místnosti byla (23.5 ± 0.5) °C. Teplota destilované vody i lihu byla před smícháním stejná.

Drátek v rámečku jsme měřili posuvným měřítkem a měl délku $l=(1.94\pm0.05)\,\mathrm{cm}$. Poloměr drátku byl $r=(0.25\pm0.03)\,\mathrm{mm}$. Rámeček měl hmotnost přibližně 200 mg.

Na váhy jsme pověsili přívažek o hmotnosti 200 mg. Jelikož síly od sebe odečítáme, nemá přívažek na výsledek žádný vliv.

Torzními vahami jsme přímo měřili rozdíl hmotností na obou ramenech. Ke změření síly je tedy nutný přepočet na tíhovou sílu F=mg, tedy

$$P_1 = m_1 \cdot g \qquad P_2 = m_2 \cdot g \,, \tag{3}$$

kde m_1 , m_2 jsou váhami změřené rozdíly hmotností na ramenech, když je rámeček těsně pod vodou resp. právě se odtrhl od hladiny. Tíhové zrychlení v Praze je $9.814 \,\mathrm{m\,s^{-2}}$ [3], chybu zanedbáváme.

Nejdříve jsme změřili povrchové napětí čisté destilované vody a čistého lihu. Poté jsme s pomocí pyknometru připravili roztok s 50% koncentrací lihu a tento roztok jsme dále ředili vodou vždy v poměru 1:1.


V tabulce 1 jsou pro měřené koncentrace uvedeny hodnoty m_1 , m_2 , vypočtené síly P_0 , přibližné hustoty ϱ při dané koncentraci (hmotnostní koncentraci jsme odhadli objemovou koncentrací a hustotu určili z tabulek [4]) a povrchové napětí σ podle (2). U m_1 a m_2 uvádíme přímo číselný údaj na vahách, pro výpočet celkové hodnoty P_1 nebo P_2 by bylo nutné přičíst hmotnost přívažku.

Směrodatnou odchylku μ_m^i určení rozdílu hmotností (m_2-m_1) odhadujeme na 5 mg. Z toho se odvíjí směrodatná odchylka síly $\mu_{P_0}=0.05\,\mathrm{mN}$. Směrodatnou odchylku povrchového napětí počítáme jako

$$\mu_{\sigma} = \sigma \sqrt{\left(\frac{\mu_{P_0}}{P_0}\right)^2 + \left(\frac{\mu_l}{l}\right)^2} \,. \tag{4}$$

Chybu členu s r ve vztahu (2) zanedbáváme s ohledem na to, že je o řád menší než první zlomek. Závislost povrchového napětí na koncentraci lihu v roztoku je zanesena do grafu 1.


 $^{{}^{\}mathrm{i}}\mathrm{Symbol}\;\mu$ pro směrodatnou odchylku používáme, aby nedošlo k záměně za povrchové napětí $\sigma.$

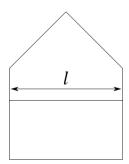

Obrázek 1: Náčrt použitého rámečku, na obrázku je vyznačena délka drátku l.

koncentrace lihu	$m_1(\text{mg})$	$m_2(\text{mg})$	$P_0(mN)$	$\varrho({\rm kgm^{-3}})$	$\sigma(10^{-3}{\rm Nm^{-1}})$
0 %	125	448	3,17	998	74 ± 3
0,4%	118	430	3,06	997	71 ± 3
0.8%	117	419	2,96	996	69 ± 3
$1{,}6\%$	113	404	$2,\!86$	995	66 ± 3
3,1%	116	401	2,80	989	65 ± 3
6,3%	111	370	$2,\!54$	987	58 ± 3
$12{,}5\%$	109	327	2,14	978	48 ± 2
25%	106	277	1,68	962	37 ± 2
50%	105	238	1,31	915	28 ± 2
100%	106	225	1,17	789	25 ± 2

Tabulka 1: Naměřené hodnoty povrchového napětí pro různé koncentrace lihu v roztoku

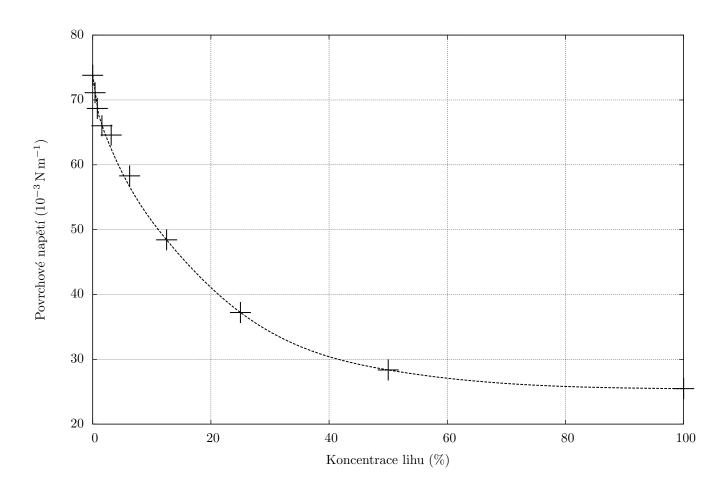

Graf 1: Závislost povrchového napětí na koncentraci lihu v roztoku

Diskuze

Zdroj [5] uvádí při 20 °C povrchové napětí destilované vody $(72,75\pm0,36)\,10^{-3}\,\mathrm{N\,m^{-1}}$ a při 30 °C napětí $(71,99\pm0,36)\,10^{-3}\,\mathrm{N\,m^{-1}}$. Naše hodnota $(74\pm3)\,10^{-3}\,\mathrm{N/m}$ při 23,5 °C se v rámci směrodatné odchylky s těmito hodnotami shoduje.

Zdroj [6] uvádí pro teploty okolo 20 °C povrchové napětí ethanolu $(22,10-0,0832(t-20 \,^{\circ}\text{C}))10^{-3}\,\text{N}\,\text{m}^{-1}$, pro teplotu 23,5 °C tedy přibližně 21,8 $10^{-3}\,\text{N/m}$. Naše hodnota $(25\pm2)\,10^{-3}\,\text{N/m}$ se s ní shoduje v rámci dvou směrodatných odchylek.

Při mísení lihu s vodou dochází k exotermické reakci a směs se zahřívá. Po smíchání jsme před měřením vždy chvíli počkali, ale směs mohla mít stále nepatrně vyšší teplotu. Povrchové napětí je na teplotě závislé, chybu způsobenou změnou teploty ale považujeme za menší než chybu způsobenou nepřesností měření, náhodnými jevy a systematickou chybu metody a zanedbáváme ji.

Další efekt, který mohl způsobit chybu, je kontrakce objemu při mísení lihu s vodou. Po dvojnásobném zředení v poměru 1 : 1 totiž nevznikne roztok o stejné koncentraci jako po jednom zředění v poměru 1 : 3. Tuto chybu však považujeme za zanedbatelnou s ohledem na další nepřesnosti při mísení.

Použitý líh samozřejmě nebyl stoprocentní. Uvedené koncentrace pouze vyjadřují poměr, ve kterém jsme ho mísili s destilovanou vodou.

Závěr

Měřili jsme závislost povrchového napětí na koncentraci lihu v roztoku. Změřili jsme povrchové napětí destilované vody $(74 \pm 3) \, 10^{-3} \, \text{N/m}$ a čistého lihu $(25 \pm 2) \, 10^{-3} \, \text{N/m}$ při teplotě $(23,5 \pm 0,3) \, ^{\circ}\text{C}$.

Tyto hodnoty se téměř shodují s tabelovanými.

Co se týče závislosti na koncentraci lihu (viz graf 1), zjistili jsme, že přidání i velmi malého množství lihu do destilované vody má za následek rapidní pokles povrchového napětí. Se zvyšující se koncentrací povrchové napětí stále klesá, nicméně při vyšších koncentracích již efekt není tak patrný.

Všechny uvedené koncentrace jsou objemové a všechny odchylky jsou směrodatné (P = 68%).

Seznam použité literatury

- 1. Závislost povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky Studijní text pro fyzikální praktikum I MMF UK [online]. [cit. 2016-04-10]. Dostupný z WWW: \http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_104.pdf\rangle.
- 2. HORÁK, Z.; KRUPKA, F. Fyzika. Praha: SNTL, 1981.
- 3. Wolfram Alpha Widget: Gravitational Fields. Dostupný z WWW: (http://goo.gl/dtWkdT).
- 4. Handymath.com Density and Concentration Calculator for Mixtures of Ethanol and Water at 20 °C [online]. [cit. 2016-04-18]. Dostupný z WWW: \(\http://www.handymath.com/cgi-bin/ethanolwater3.cgi?submit=Entry \).
- 5. VARGAFTIK, N. B.; VOLKOV, B. N.; VOLJAK, L. D. International tables of the surface tension of water. *J. Phys. Chem.* 1983. Dostupný také z WWW: (http://www.nist.gov/data/PDFfiles/jpcrd231.pdf).
- 6. Surface tension values of some common test liquids for surface energy analysis [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupný z WWW: \(\http://www.surface-tension.de/ \).